

# MILLEWIN

## Millelight smartcard

MANUALE D'USO  
VER.20.0.27

#### **PROPRIETA' DELLE INFORMAZIONI**

Il presente manuale d'uso è un documento emesso da Millennium. Costituisce parte integrante del Software Millewin, pertanto deve essere conservato con la massima cura durante la vita operativa del software, in un luogo facilmente accessibile e noto a tutti gli utilizzatori, al riparo da liquidi e quant'altro ne possa compromettere lo stato di leggibilità. Gli operatori ed i manutentori devono poterlo reperire e consultare rapidamente in qualsiasi situazione.

Eventuali copie del documento dovranno essere regolarizzate inoltrando richiesta a Millennium.

Nell'ipotesi che Millennium apporti modifiche/migliorie al software Millewin, il presente manuale verrà aggiornato e le aggiunte costituiranno parte integrante del software. È fatto esplicito divieto apportare qualsiasi modifica al presente manuale. La non ottemperanza a questa norma rende libera Millennium da ogni responsabilità e resa di garanzia.

## DOCUMENT REVISION


Rev Number	Rev Date	Summary of Changer	Responsible
0	2/02/2021	Prima emissione	Antonello Guggino
1	10/03/2021	Allineamento alla release 20.0.18	Antonello Guggino
2	14/04/2021	Allineamento alla release 20.0.19	Antonello Guggino

## APPROVALS

Approver	Function	Role	Date
Antonello Guggino	Product Owner	Author	14/04/2021
Emanuela Consoli	Product Marketing Manager	Approver	14/04/2021

## MARCATURA CE

Il dispositivo medico Millewin è realizzato in Conformità con le direttive UE pertinenti.

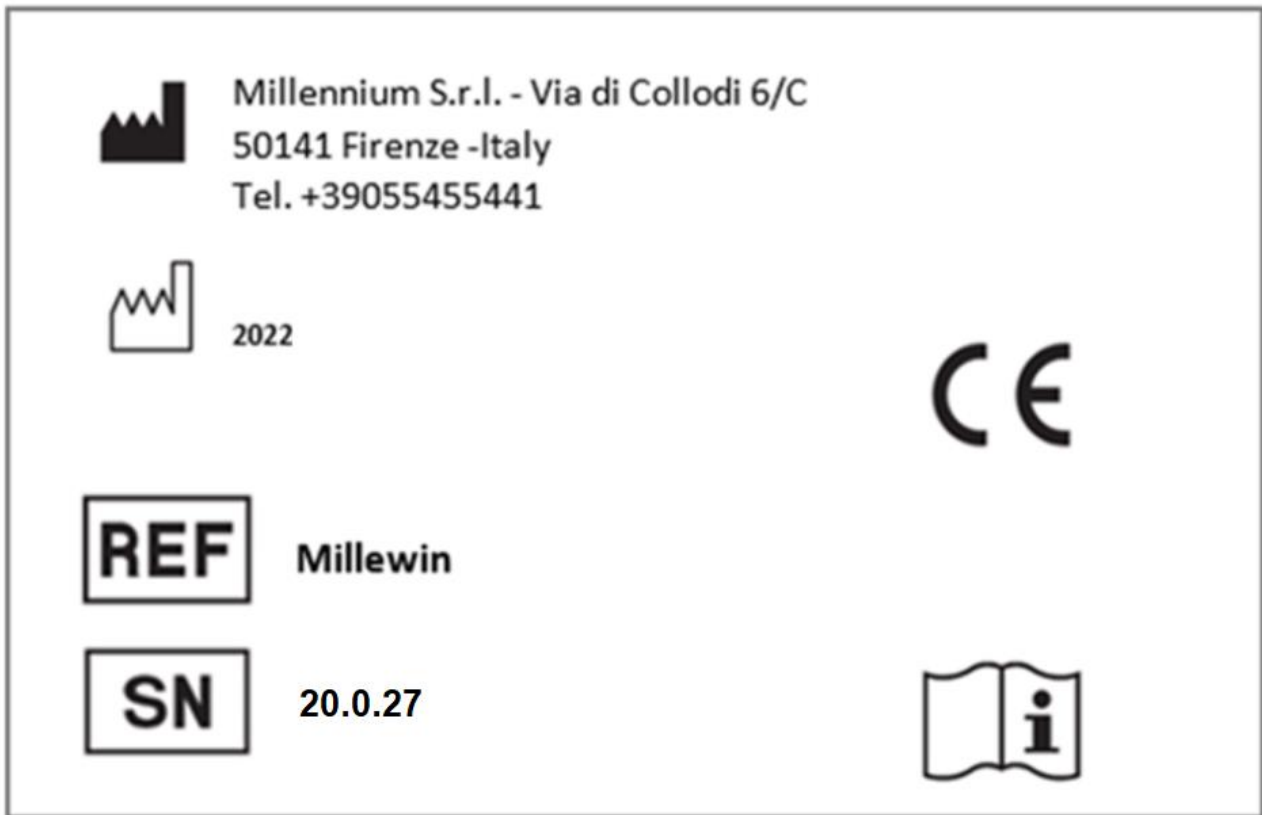

## SOMMARIO

<b>MILLECLOUD integrazione tra Millewin e Millelight</b>	<b>6</b>
Introduzione	6
Come attivare e configurare MilleCloud per il medico titolare	7
Come abilitare il collaboratore di studio alle funzionalità MilleCloud	10
<b>Prescrizione effettuata dal MEDICO in mobilità</b>	<b>12</b>
Come effettuare una prescrizione da Millelight	12
<b>Esempi di utilizzo</b>	<b>15</b>
La segretaria predispose le impegnative dallo studio A che medico potrà dematerializzare dallo studio B	15
Il medico A presso il domicilio del paziente predispose da Millelight una prescrizione che il collega B recupera in ambulatorio da Millewin per la dematerializzazione	16

## MILLECLOUD integrazione tra Millewin e Millelight

### Introduzione


Millelight è la soluzione mobile di Millewin che da dispositivo tablet o smartphone consente la gestione della cartella clinica dei pazienti utilizzando le principali funzionalità di Millewin.

**Per utilizzare Millelight** digitare: <https://millelight.millewin.it> dal browser del proprio tablet, smartphone, personal computer e inserire le credenziali di accesso (username e password) già note perché utilizzate per i servizi RRS.net e RRS.tab.

Nelle pagine seguenti verrà descritta la procedura di attivazione e configurazione del sistema con alcuni casi di uso sia per il Medico che per il personale di studio.

## Come attivare e configurare MilleCloud per il medico titolare


- Dopo aver fatto accesso a Millewin con l'utenza del medico titolare, fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona di Gestione Studio presente nella barra di Windows

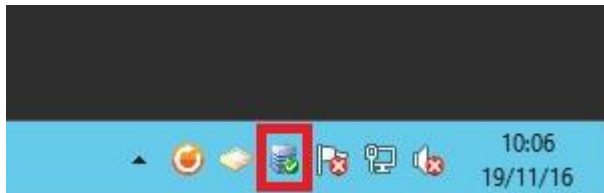


- Fare clic su *Configura Cloud*




- Comparirà la videata *Configurazione Cloud*

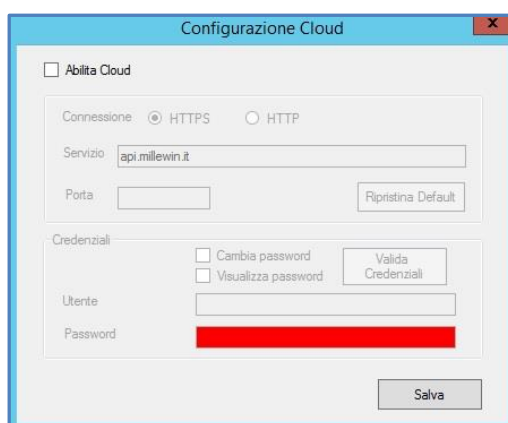

- Selezionare la voce *Abilita Cloud* ed inserire le proprie credenziali per i servizi Cloud *RRS.net - RRS.tab - Millelight* (Utente e Password) come riportato nell'immagine di seguito

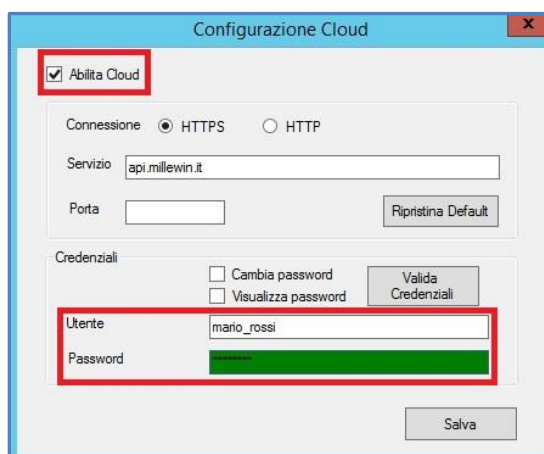


- Cliccare su *Valida Credenziali*

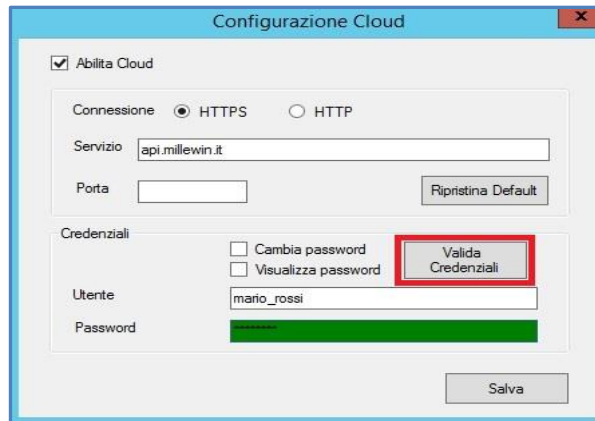


The screenshot shows the 'Configurazione Cloud' dialog box. It has a title bar with a close button. The main area contains several sections: 'Abilita Cloud' with a checked checkbox; 'Connessione' with radio buttons for 'HTTPS' (selected) and 'HTTP'; 'Servizio' with a text field containing 'api.millewin.it'; 'Porta' with an empty text field and a 'Ripristina Default' button; 'Credenziali' with checkboxes for 'Cambia password' and 'Visualizza password' (both unchecked), and a 'Valida Credenziali' button highlighted with a red rectangle; 'Utente' with a text field containing 'mario\_rossi'; and 'Password' with a green masked text field. A 'Salva' button is at the bottom right.

Se le credenziali inserite risultano corrette, verrà mostrato a video il seguente messaggio

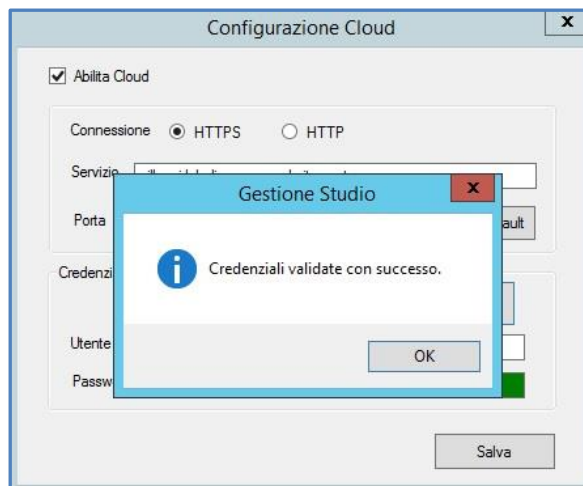

The screenshot shows the 'Configurazione Cloud' dialog box with a 'Gestione Studio' message box overlaid. The message box has a title bar with a close button and contains an information icon, the text 'Credenziali validate con successo.', and an 'OK' button. The background dialog box is partially obscured but shows the same fields as the previous screenshot.

- Cliccare su *OK*

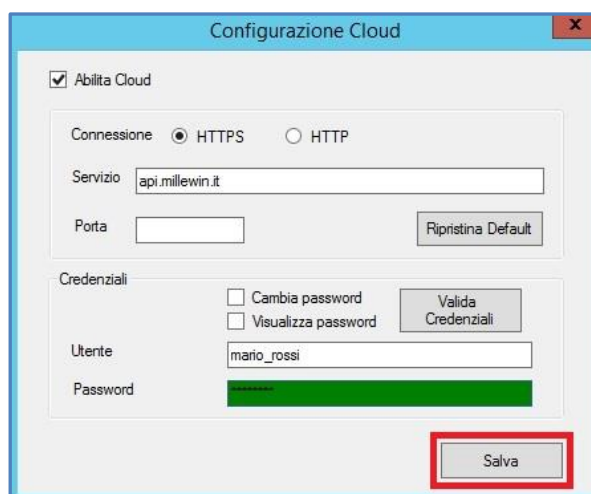


The screenshot shows the 'Configurazione Cloud' dialog box. The 'Valida Credenziali' button is no longer highlighted. The 'Salva' button at the bottom right is now highlighted with a red rectangle. All other fields and options remain the same as in the previous screenshot.

- Cliccare sul pulsante *Salva*



Verrà mostrato a video il seguente messaggio.

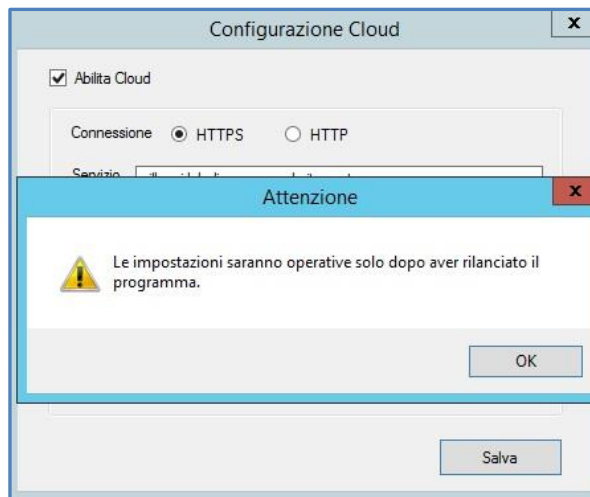

- Fare clic su *OK* e successivamente chiudere Millewin per memorizzare la configurazione Cloud.


## Come abilitare il collaboratore di studio alle funzionalità MilleCloud

Per poter abilitare i collaboratori di studio all'utilizzo delle funzioni cloud è necessario effettuare il censimento degli utenti sul portale [www.millecloud.it](http://www.millecloud.it)

- Il medico deve accedere a [www.millecloud.it](http://www.millecloud.it) con le proprie credenziali Cloud (le stesse utilizzate per *RRS.net* - *RRS.tab* - *Millelight*)




- Dopo aver effettuato l'accesso, cliccare sul pulsante *Aggiungi*

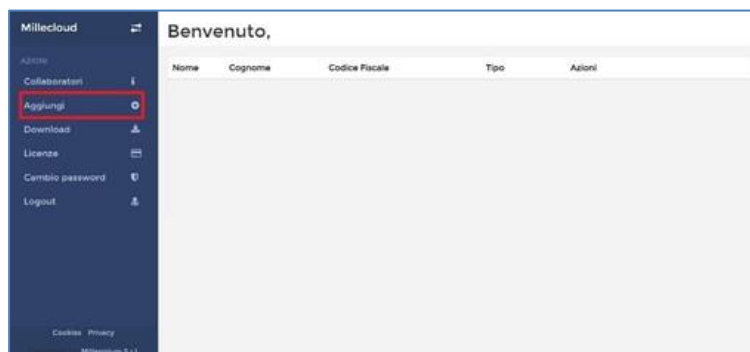

- Inserire il codice fiscale del collaboratore che si vuole censire e fare clic su *Avanti*



- Inserire i dati del collaboratore  
*sono obbligatori i campi contrassegnati dal simbolo \**
- Scegliere dal menu a tendina il tipo di collaboratore: *Segretaria/o*

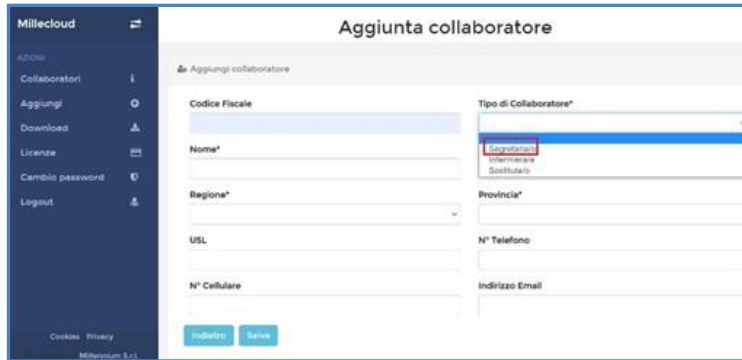

- Cliccare sul pulsante *Associa*


A video verranno mostrate le credenziali composte da username e password temporanea

**AVVERTENZA**

CREDENZIALI DA COMUNICARE

- Username: mario\_rossi
- Password Temporanea: rmario

- Username e password temporanea dovranno essere consegnate al collaboratore, che da [www.millecloud.it](http://www.millecloud.it) dovrà inserire la password definitiva.

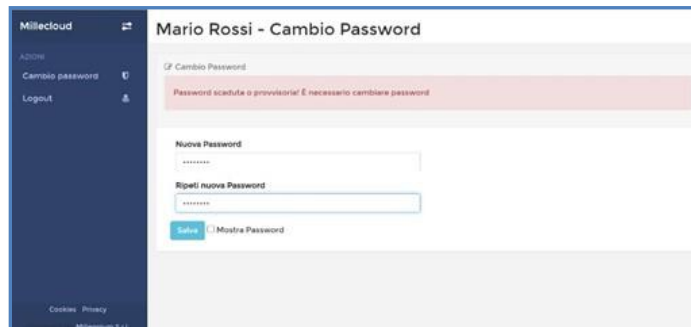

Consigliamo di fare clic su Recupero password per attivare la modalità di recupero nel caso venisse dimenticata (si tratta di impostare alcune informazioni rispondendo a semplici domande).

### IMPORTANTE!

Per **abilitare il cloud al collaboratore di studio** ripetere la procedura descritta al punto 1.1, accedendo a Millewin come collaboratore ed impostando le credenziali cloud del collaboratore

## Prescrizione effettuata dal MEDICO in mobilità

In questo paragrafo verrà spiegato come prescrivere un farmaco o una prestazione specialistica a domicilio con Millelight. La prescrizione effettuata a domicilio del paziente sarà recuperata, convalidata e inviata per email o stampata al rientro in studio con Millewin.

Nella fase prescrittiva a domicilio il Medico potrà decidere la modalità di invio della prescrizione:


- ✓ Invio per email
- ✓ Stampata in studio
- ✓ Inviata la portale MilleBook

## Come effettuare una prescrizione da Millelight

- Accedere a <https://millelight.millewin.it> con le proprie credenziali (sono quelle utilizzate per RRS.net e RRS.tab)



- Ricercare un paziente digitando le iniziali di cognome e nome




- Selezionare il paziente per entrare in visita
- Posizionarsi su *Terapie* ed utilizzare il pulsante + per prescrivere un nuovo farmaco
- Ricercare il farmaco da prescrivere nel prontuario digitando le iniziali del campo *CERCA*, selezionarlo e premere *OK*



CERCA	ricerca per	Non sostituibile	Stampa solo P.A.	OK	ANNULLA
ZIMOX*12CPR 1G	zimax	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
A CD	ZIMOX*12CPR 1G			4.90	
A CD	ZIMOX*12CPR SOLUB/MAST 1G			5.60	
A CD	ZIMOX*12CPR SOLUB/MAST 500MG			2.98	
A CD	ZIMOX*OS POLVXSOSP 250MG/5ML			3.27	

- Compilare i dati per la prescrizione, come numero di confezioni, posologia, esenzione, problema associato, suggerito, ecc...
- Confermare con *OK*
- Selezionare il farmaco ed utilizzare l'icona della stampante per procedere all'invio della prescrizione

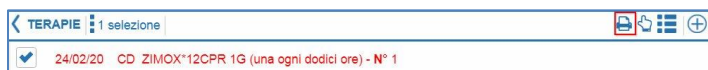

- Controllare l'esenzione eventualmente proposta e confermare con *OK* per proseguire, oppure selezionare dove indicato per cambiare l'esenzione e successivamente premere *OK*




- Selezionare la modalità con cui si vuole inviare la prescrizione al paziente dopo la convalida
  - ✓ *Rossa*
  - ✓ *Dematerializzata Invio NRE e promemoria per mail*
  - ✓ *Dematerializzata Mail con NRE*
  - ✓ *Dematerializzata*
  - ✓ *Promemoria su MilleBook*


### IMPORTANTE

La convalida dovrà avvenire sulla postazione di studio, da Millewin, con la smart card inserita

- L'immagine di seguito mostra il messaggio restituito a video che conferma l'invio della prescrizione allo studio

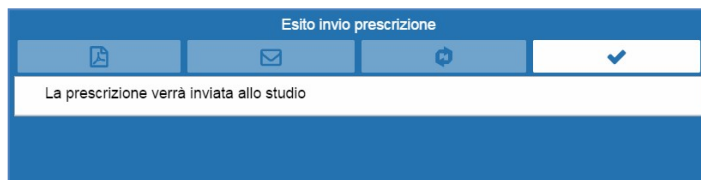


- La prescrizione effettuata a domicilio del paziente da Millelight sarà recuperata automaticamente in *Gestione Studio* dopo aver aperto Millewin

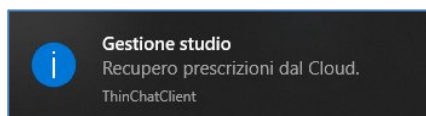


- Per scaricare le prescrizioni, da *Gestione Studio* cliccare sulla nuvoletta *Recupera prescrizioni da Cloud*




- La prescrizione effettuata da Millelight sarà visualizzata in *Gestione Studio* con lo sfondo di colore bianco, poiché ancora non dematerializzata e quindi non stampata e non inviata al paziente

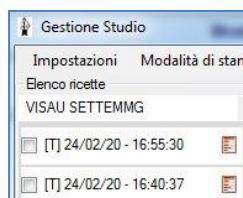

- Selezionare le prescrizioni di interesse

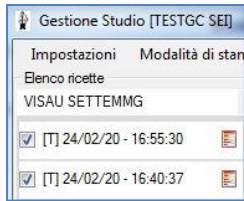

- Fare clic sul pulsante *Invia*
- La prescrizione dematerializzata e stampata o inviata al paziente mostrerà nello *Stato invio ricetta* di Gestione Studio il tipo di invio prescelto dal medico su Millelight al momento della prescrizione

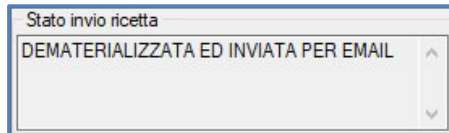

## Esempi di utilizzo

### La segretaria predispose le impegnative dallo studio A che medico potrà dematerializzare dallo studio B

- La segretaria da Millewin predispose le impegnative
- Da Gestione Studio le invia al cloud cliccando sulla nuvoletta *Invia prescrizioni al cloud*



- Il numero delle prescrizioni si sposta dalla prima nuvoletta, alla nuvoletta di *Recupera prescrizioni da cloud*



- Il medico che sta lavorando con Millewin in un secondo ambulatorio (studio B), da Gestione Studio può recuperare le prescrizioni fatte dalla segretaria che sta lavorando nello studio A. Il medico deve quindi fare clic sulla nuvoletta *Recupera prescrizioni da cloud*



- Compaiono le ricette predisposte dalla segretaria




- Il medico deve selezionare le prescrizioni da dematerializzare, stampare o inviare al paziente
- Il medico deve fare clic sul pulsante *Invia* per convalidare e inviare le prescrizioni selezionate

Il medico A presso il domicilio del paziente predispose da Millelight una prescrizione che il collega B recupera in ambulatorio da Millewin per la dematerializzazione

### IMPORTANTE

Entrambi i medici devono essere presenti nel database dello studio


- Il medico A, presso il domicilio del paziente, predispose le prescrizioni da Millelight, inviandole allo studio

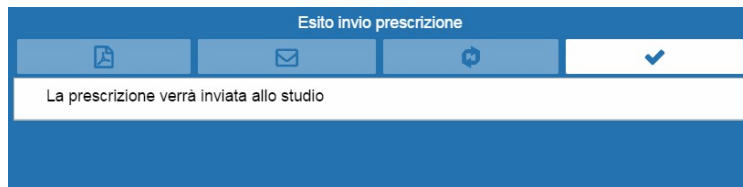

- Allo studio il collega B, titolare di Millewin può dematerializzare e gestire le prescrizioni fatte a domicilio scegliendo dal menu a tendina il nominativo del collega



- Fare clic sull'icona *Recupera prescrizioni cloud* per recuperare la prescrizione effettuata dal Medico A con Millelight

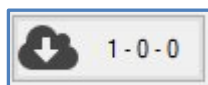

- Selezionare le prescrizioni di interesse e fare clic su *Invia* per dematerializzare