

Istruzioni all'installazione e all'utilizzo del progetto ANR




INSTALLAZIONE

- Chiudere tutte le applicazioni aperte (se si lavora in rete stoppare il *Milleser.exe*)
- Scaricare in una cartella temporanea (ad esempio c:\temp) il file Setup_Ricerca_ex_Anr.exe
- Accedere nella cartella ed eseguire il file Setup_Ricerca_ex_Anr.exe appena scaricato, seguire le istruzioni a video.

INSERIMENTO LICENZA ADDON

Procedere da Start\Programmi\Millewin\Utility\Gestore progetti XDE

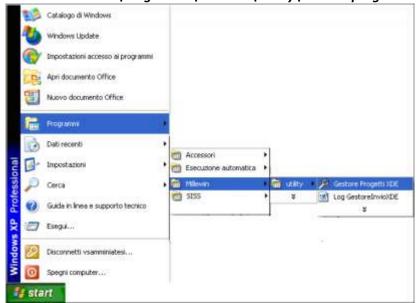


- Al comparire della finestra sotto riportata, inserire:
 - "Nome Utente"
 - "Password" di accesso al programma Millewin:



• Nella schermata che si apre cliccare sul pulsante Inserisci Licenza:




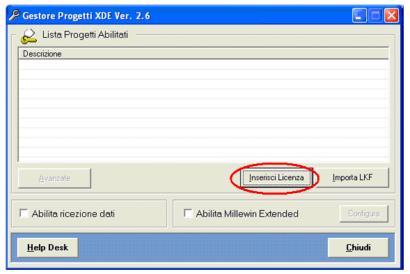

• Si aprirà la videata riportata di seguito, quindi fare clic sull'icona di destra (nell'immagine cerchiata in rosso):



• Inserire il proprio Codice di Attivazione Add-on di 14 caratteri e premere "OK":

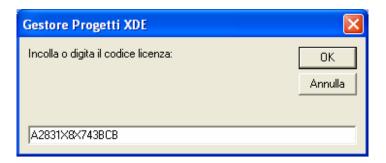

• Fare clic sul tasto Applica:




• Comparirà la seguente videata di Conferma, cliccare su OK:





 Nella videata iniziale di Gestore Progetti XDE, comparirà il nome del progetto abilitato e la data di scadenza

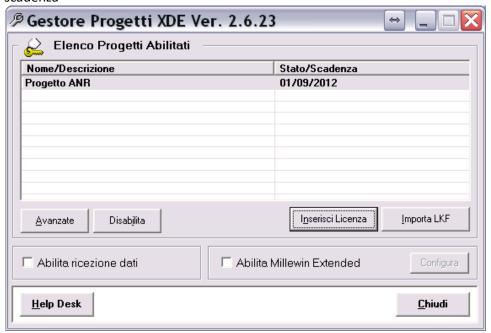



INVIO DATI

• Saranno presenti sul desktop l'icona Mille ANR e Mille ANR stop



- Cliccare sull'icona *Mille ANR*, al comparire della finestra sotto riportata, inserire:
 - "Nome Utente"
 - "Password" di accesso al programma Millewin:



• Cliccare sul pulsante Nuovo Invio (la procedura durerà diverso tempo)



La prima volta che si effettua questa operazione verranno inviati tutti i dati mentre per le volte successive verrano inviate solo le variazioni

Nel caso in cui si voglia interrompere l'esecuzione dell'estrazione è necessario cliccare sull'icona Mille
ANR stop presente sul desktop