

**SOMMARIO**

COME INSERIRE LE CREDENZIALI..... 2

COME REGISTRARE IL TAMPONE ..... 3


**Modalità 1** ..... 3

**Modalità 2** ..... 5


## COME INSERIRE LE CREDENZIALI

È stata introdotta la possibilità di registrare l'esito del tampone Covid-19 da Millewin e poterlo registrare successivamente sul portale SOLE.

Procedere dal menù **Scambio dati -> Integrazione SOLE**

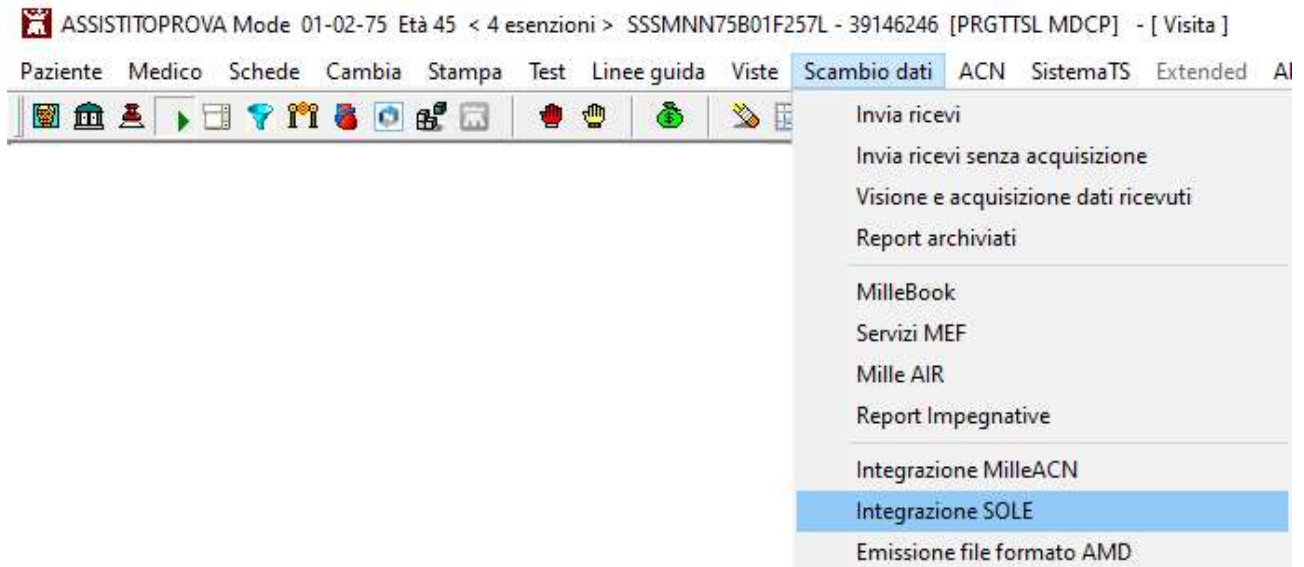

È indispensabile inserire le credenziali che il medico utilizza per accedere al portale SOLE da:  
**Strumenti -> Opzioni: PORTALE SOLE: imposta credenziali**

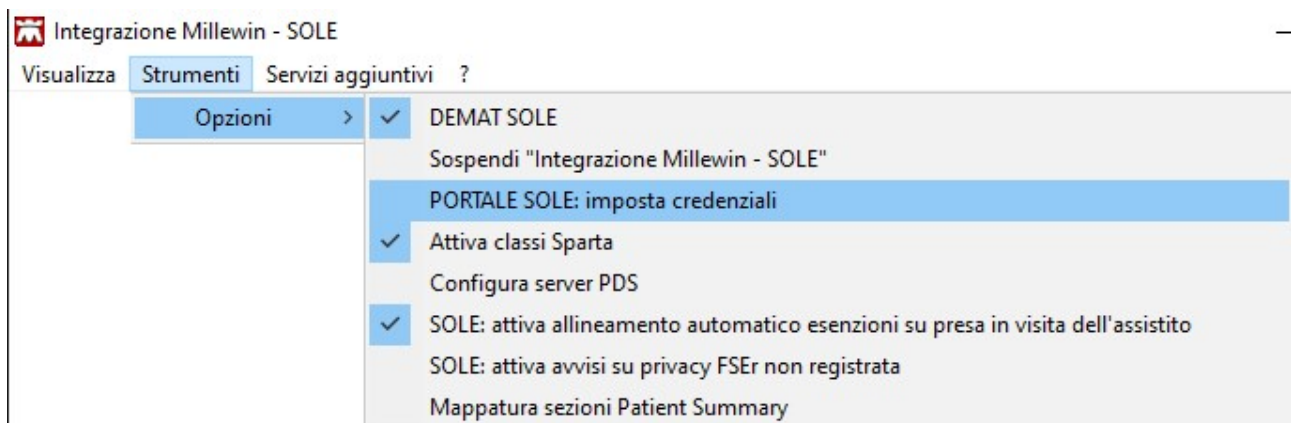

Inserire le credenziali e cliccare su **Salva**

Credenziali PORTALE SOLE

**CREDENZIALI PORTALE SOLE**

NB: per alcuni servizi la password potrebbe non essere necessaria

**Intestataro credenziali**

Progettosole MEDICOPROVA

**Username**

**Password**


*Mostra caratteri*

## COME REGISTRARE IL TAMPONE


Una volta salvate le credenziali, ci sono due modalità di registrazione del tampone e accesso al portale

### Modalità 1

Procedere dal menù **Scambio dati -> Integrazione SOLE**  
**Servizi aggiuntivi -> PORTALE SOLE: Scheda tamponi rapidi Covid19**

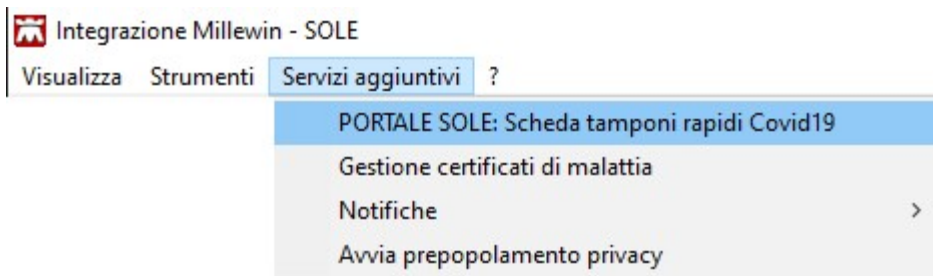

Si aprirà il Portale SOLE da dove sarà possibile accedere alla *Richiesta tampone Covid19* per la paziente in visita

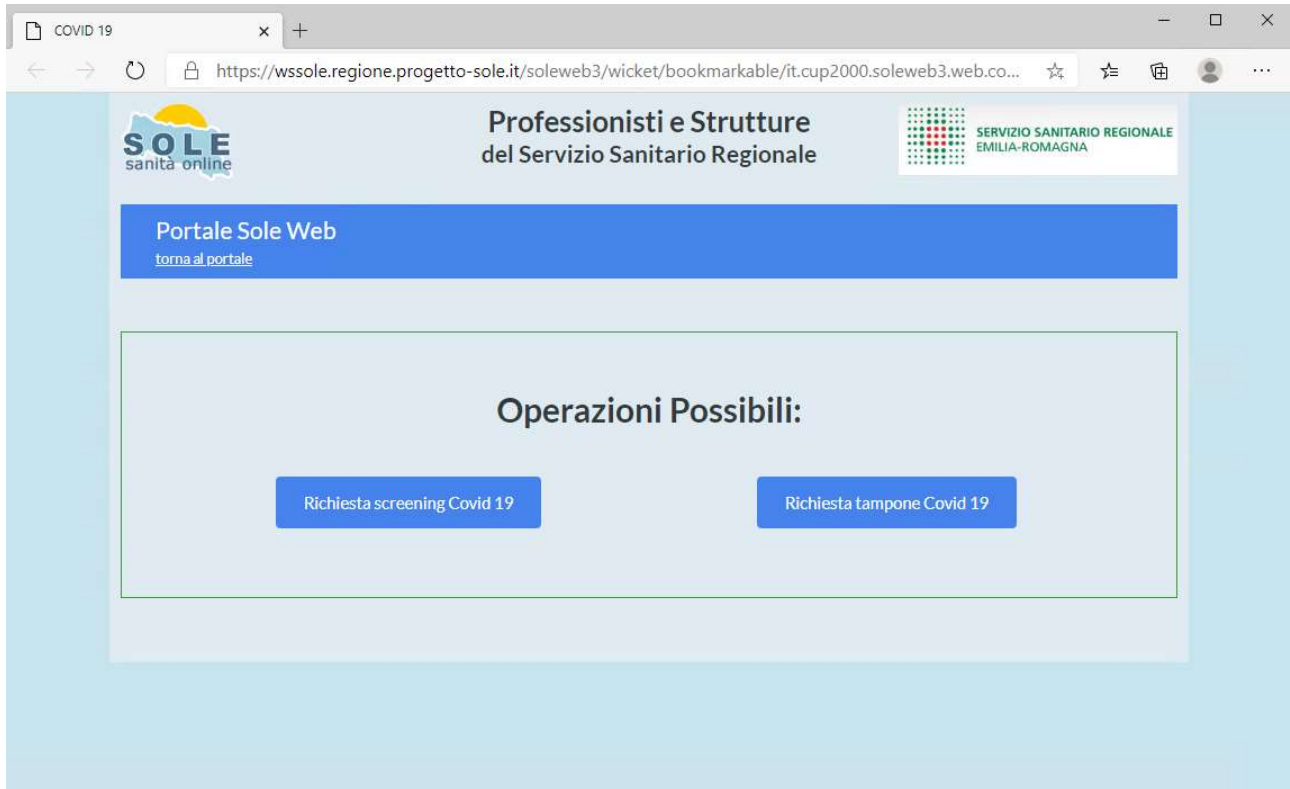

## Modalità 2

- Accedere alla tabella accertamenti e ricercare l'accertamento: **TAMPONE RAPIDO ANTIGENE SARS-COVID-2**



Tabella accertamenti

Mostra accertamenti  Mostra sinonimi Annulla

Singoli  Gruppi

Cerca  tutte le branche

tipo	Descrizione	prezzo
TST	TAMPONE RAPIDO ANTIGENE SARS-COVID-2	In Office
00	Adenovirus da tampone oculare	63,52 ●
00	HPV - Tampone Faringeo	63,52 ●

[Modifica](#)

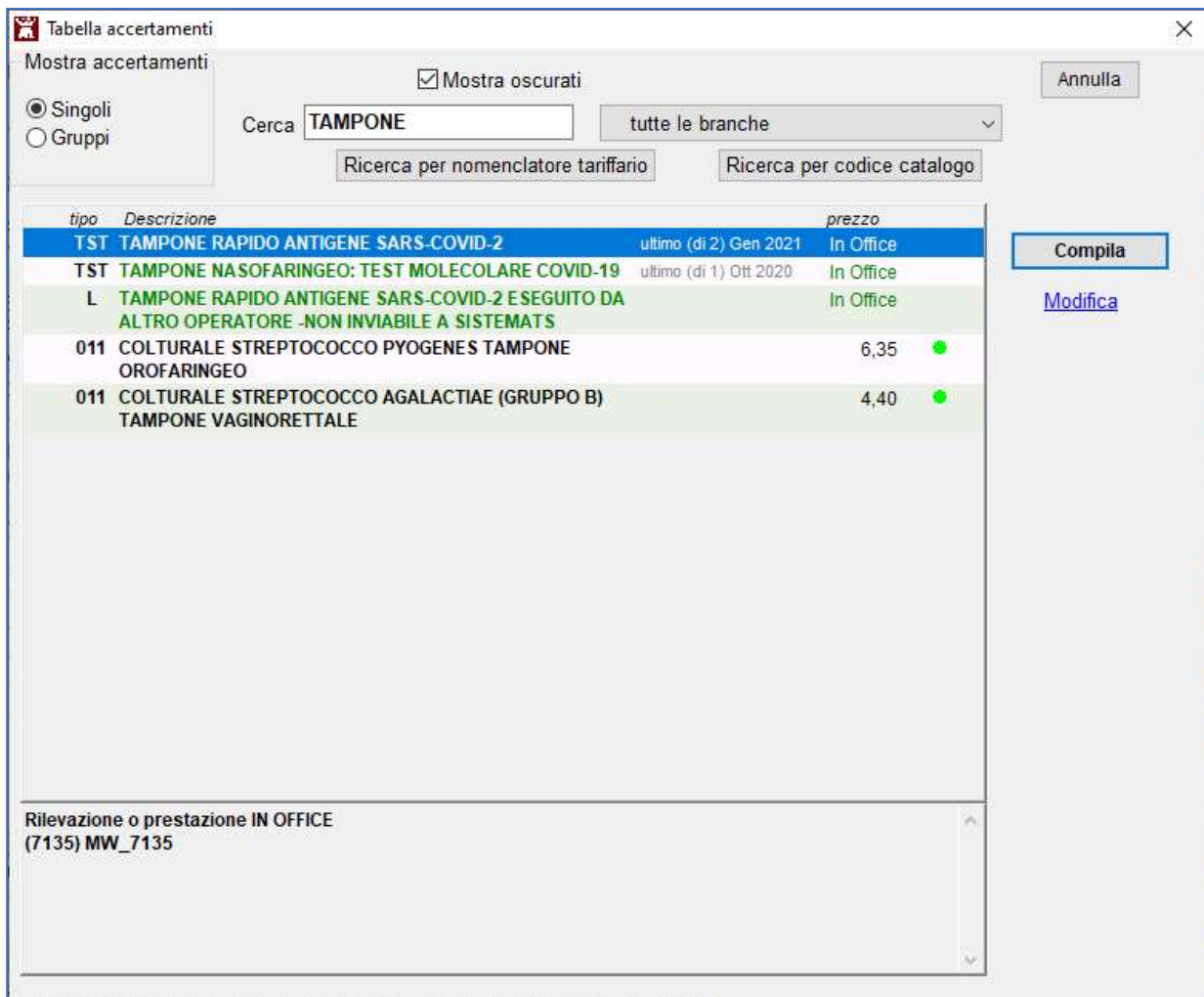


Tabella accertamenti

Mostra accertamenti  Mostra oscurati Annulla

Singoli  Gruppi


Cerca  tutte le branche

tipo	Descrizione	prezzo
TST	TAMPONE RAPIDO ANTIGENE SARS-COVID-2	ultimo (di 2) Gen 2021 In Office
TST	TAMPONE NASOFARINGEO: TEST MOLECOLARE COVID-19	ultimo (di 1) Ott 2020 In Office
L	TAMPONE RAPIDO ANTIGENE SARS-COVID-2 E SEGUITO DA ALTRO OPERATORE -NON INVIABILE A SISTEMATS	In Office
011	COLTURALE STREPTOCOCCO PYOGENES TAMPONE OROFARINGEO	6,35 ●
011	COLTURALE STREPTOCOCCO AGALACTIAE (GRUPPO B) TAMPONE VAGINORETTALE	4,40 ●

[Modifica](#)

Rilevazione o prestazione IN OFFICE  
(7135) MW\_7135

- Cliccare su *Compila* per indicare il luogo in cui è stato eseguito e il relativo risultato del test

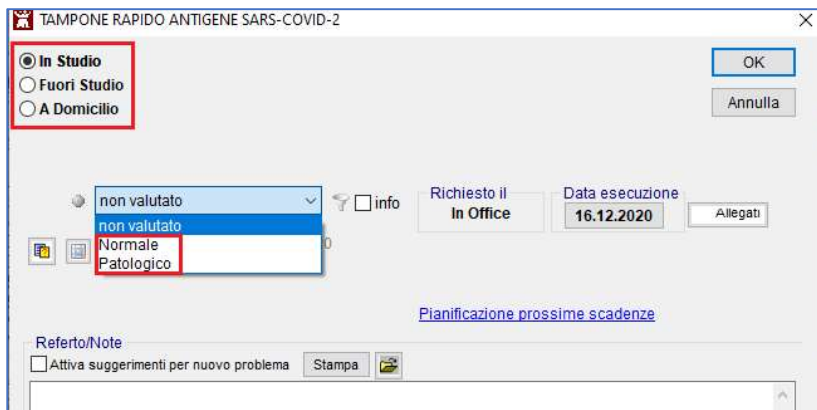


- Indicare:
  - ✓ *Normale* nel caso in cui il risultato è *Negativo*
  - ✓ *Patologico* nel caso in cui il risultato è *Positivo*
- Registrato l'esito del test, cliccare su *Ok*.

L'esecuzione del tampone rapido con le informazioni relative al luogo e al risultato verranno visualizzati nel folder *Accertamenti* della cartella del paziente.



Accertamenti	Risultato	Info	N	E	Tipo	S
16.12.20	✓				TAMPONE RAPIDO ANTI	Studio
					TST	N

Una volta salvato comparirà il messaggio per la registrazione del tampone appena prescritto in cartella, sul portale SOLE

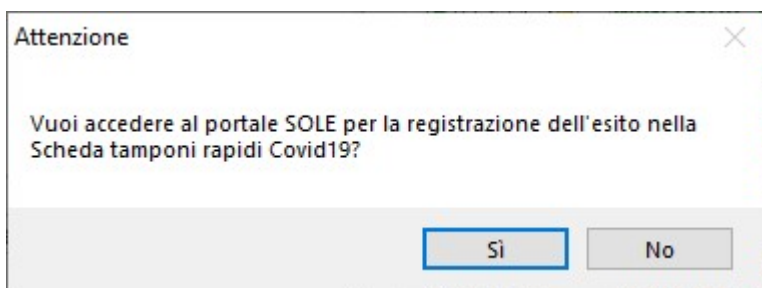

**Attenzione**

Vuoi accedere al portale SOLE per la registrazione dell'esito nella Scheda tamponi rapidi Covid19?